



ПРЕМЬЕРА

**ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СОВЕРШЕННОЕ БУДУЩЕЕ**

**ПЕРВЫЕ В МИРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ZYE И
СОВЕРШЕННАЯ ЛАЗЕРНАЯ SMART-ПЛАТФОРМА**





#1

по количеству совершенных
лазерных технологий
на одной системе

- Победитель премии прорыв года в лазерных технологиях 2020
- Победитель премии прорыв года в эстетической косметологии
- 8 уникальных технологий «золотого стандарта»
- 100+ востребованных показаний
- Высокоприбыльные технологии
- Клинически доказанные результаты
- Для всех типов кожи без сезонности
- Минимальная реабилитация
- Представлен более чем в 30 странах мира
- Удобство применения и многофункциональность
- Онлайн диагностика аппаратов от производителя в любое время

Компания VYDENCE® была основана в 2016 году в результате слияния INDUSTRA Technologies и ADVANCE Medical – таким образом, став крупнейшей бразильско-американской компанией по производству оборудования для эстетической медицины.

VYDENCE происходит от португальского слова “vidência”, что означает способность “предсказывать будущее”. Миссией компании является разработка, производство и применение инновационных и высокотехнологических медицинских систем для рынка в области дерматологии, эстетической медицины, пластической хирургии, флебологии и интимного омоложения.



VYDENCE.COM

**И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
ВСЕ САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОДНОЙ СИСТЕМЕ**


etherea^{MX}



Z Y E

YAG

ALX



“



“Благодаря различным насадкам, которые можно присоединить к платформе, представлено более 70 доступных показаний к применению ETHEREA- MX® в рамках единой системы, что дает возможность широкого выбора процедур и комбинаций в зависимости от вашей специализации и показаний. Он занимает меньше места, чем несколько автономных лазерных аппаратов, его гораздо легче комбинировать, меньше затрат на обслуживание.”

Мауриче Адатто, врач
Женева – Швейцария

“



“В своей практике работы с ProDeer® я получал отличные результаты использования этой технологии. Это насадка, сочетающая в себе эффективность, обеспечивающая минимальное время реабилитации и высокий комфорт для пациента. Самое большое отличие VYDENCE® от других – это универсальность. Это системы, которые, по-моему мнению, каждый доктор должен включить в свою практику”.

Нил Садик, доктор
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Z Y E

ПЕРВЫЕ В МИРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Познакомьтесь с самыми умными, мощными
и универсальными системами лазерных платформ
со встроенными лазерными оптоволоконными
насадками ALX 755 нм или Nd:YAG 1 064 нм.





ОПТОВОЛОКОННЫЙ НАКОНЕЧНИК 3- 10/VL

Наконечник с сапфировым охлаждением и телескопическим цифровым зумом для работы с доброкачественными кожными сосудистыми поражениями.



ОПТОВОЛОКОННЫЙ НАКОНЕЧНИК 3- 24/HR

Самый мощный наконечник для удаления волос для всех фототипов кожи, для удаления доброкачественных кожных сосудистых поражений, терапии онихомикоза.



ОПТОВОЛОКОННЫЙ НАКОНЕЧНИК 8- 18/HR

Наконечник с сапфировым охлаждением и телескопическим цифровым зумом для изменения размера пятна, для удаления волос, для всех фототипов.



ОПТОВОЛОКОННЫЙ НАКОНЕЧНИК 5- 15/LT

Эксклюзивно для ZYE YAG®, для лазерной подтяжки и омоложения кожи. Особые программы Laser Tightening ®



**НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:**
ZYE ALEX 755-нм или ZYE
Nd:YAG 1 064 нм



**ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ**
Высокая мощность для
эффективной терапии.
РЕЖИМ DYNAMYCS®



**ВЫСОКАЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ:**
До 100 показаний в одной
системе, что обеспечивает
максимальную
комбинацию методов
терапии.



**УМНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ:**
Wi-Fi диагностика
в режиме реального
времени для
обеспечения
идеальной работы.

НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ ЛАЗЕРНЫЕ И СВЕТОВЫЕ НАСАДКИ



DUALMODE



ER: YAG 2940
DualMode Dynamics
для мягкой полировки кожи

InLift – инфраоральный
лифтинг, процедура
омоложения со стороны
слизистой полости рта



TrueLift – омоложение
периорбитальной области.
Несколько режимов работы
для решения большинства
эстетических проблем кожи



IPL·sq



Охлаждение до 2°C
на платформе ZYE®

Самые разнообразные показания
для IPL терапии с запатентованной
технологией square-wave pulse

Типсы для локального воздействия



IPL DYNAMICS® для динамичного
режима процедур



longpulse



Nd:YAG 1,064-нм
LP/Dynamics

Больше энергии,
больше возможностей


Для омоложения

Для удаления
сосудистых поражений
кожи

3-24/HR НАКОНЕЧНИК ALEX ИЛИ YAG

ЛЕГКО ПОДКЛЮЧАЕМАЯ НАСАДКА С ПЯТНОМ
ДО 24 ММ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Адаптер для воздушного
охлаждения, для эффективного
и бесконтактного охлаждения
эпидермиса.

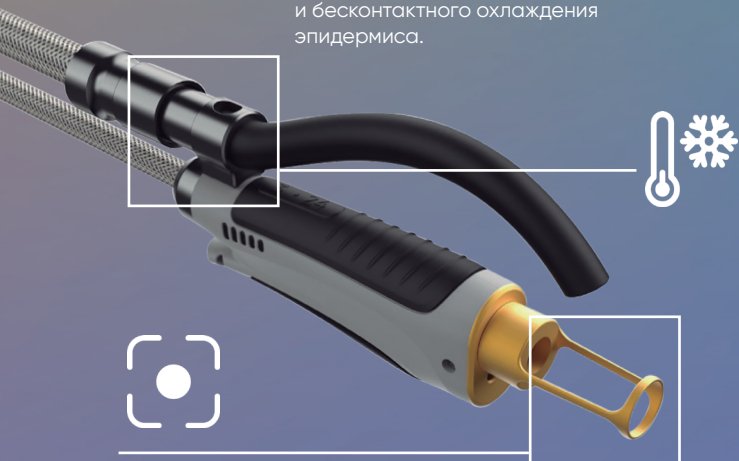

11 легко подключаемых наконечников с пятном
диаметром до 24 см, обеспечивающих гораздо
более быстрое удаление волос даже на самых
больших участках, с широким диапазоном
доступных размеров пятна.

8-18/HR НАКОНЕЧНИК ALEX ИЛИ YAG

ОХЛАЖДЕНИЕ COOL-&-CLEAR
И КВАДРАТНОЕ ПЯТНО FLAT-FRAME®

Технология FLAT-
FRAME® с квадратным
пятном обеспечивающая
на 25% большую площадь
обработки.

Система ZYE TELESCOPE®
с цифровым оптическим
зумом, увеличивающая
скорость переключения
пятен разного размера.




Сапфир COOL-&-CLEAR® с интенсивным контактным
охлаждением, обеспечивающим повышенный
комфорт пациента и безопасность процедуры.

3-10/VL НАКОНЕЧНИК ALEX ИЛИ YAG

ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗУМ ZYE TELESCOPE®

Система ZYE TELESCOPE®
с цифровым оптическим зумом,
увеличивающая скорость
переключения между рабочими
пятнами разного размера.

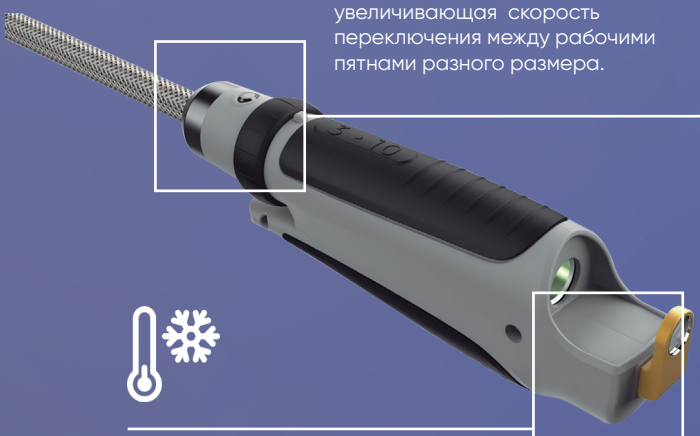

Сапфир COOL-&-CLEAR® с интенсивным контактным
охлаждением, обеспечивающим повышенный комфорт
пациента и безопасность процедуры.
Сапфир COOL-&-CLEAR® с интенсивным контактным
охлаждением, обеспечивающим повышенный комфорт
пациента и безопасность процедуры.

5-15/LT НАКОНЕЧНИК ZYE YAG®

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ACCUSENSE®

AccuSense® для контроля температуры
кожи в режиме реального времени,
обеспечивает точность, необходимую для
глубокой лазерной подтяжки Laser Tightening.



Лазерная направляющая с контролем расстояния для
омоложения и подтяжки кожи Laser Tightening, которая
обеспечивает доставку лазерного луча на нужную глубину.

Z Y E

ALEX 755 нм

Познакомьтесь с лучшим
в мире лазерным аппаратом
для удаления волос.

Познакомьтесь с лучшим в мире лазерным аппаратом для удаления волос всех времен. Самая совершенная технология для проведения процедур лазерной эпиляции с максимальной безопасностью и комфортом. Суперплатформа ZYE ALEX®, использующая лучшие эффективные параметры, самую высокую мощность и 2 различные системы охлаждения, предлагая новое решение для удаления волос на всех типах кожи и для всех типов волос без ограничений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ДЛИНА ВОЛНЫ	ALEXANDRITE 755-нм
РАЗМЕР ПЯТЕН	3 - 24 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	55 Дж
ШИРИНА ИМПУЛЬСА	От 300 мкс до 300 мс
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ	DYNAMICS®: до 20 Гц LongPulse®: до 3 Гц
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Сапфировое контактное охлаждение или охлаждение холодным воздухом



Фотография предоставлена Валерией Кампос,
доктором, Бразилия



Фотография предоставлена Валерией Кампос,
доктором, Бразилия

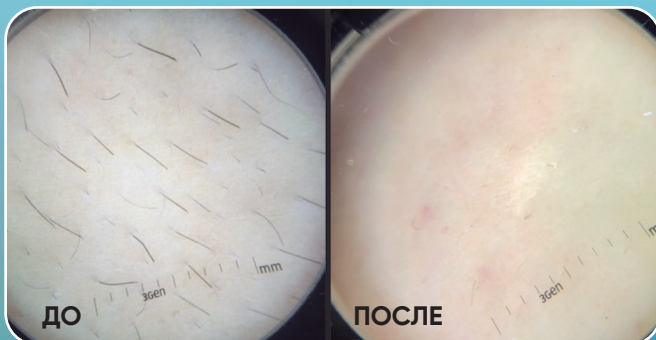

Фотография предоставлена Валерией Кампос,
доктором, Бразилия



Фотография предоставлена Валерией Кампос,
доктором, Бразилия

Z Y E

YAG 1,064 нм

Лучший на рынке лазерный аппарат
для лечения сосудистых поражений
кожи, омоложения и удаления волос.

ZYE YAG® обеспечивает золотой стандарт длины волны для безопасных и эффективных процедур благодаря самой передовой технологии, суперплатформы с более чем 20 пятнами и 3 различными режимами работы для подтяжки и омоложения кожи, что является новым подходом в эстетике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА ВОЛНЫ	Лазер Nd:YAG 1064 нм
РАЗМЕР ПЯТЕН	3 - 24 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	95 Дж
ШИРИНА ИМПУЛЬСА	200 мкс - 300 мс
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ	DYNAMICS®: до 20 Гц LongPulse®: до 3 Гц INTENSE: непрерывная волна
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Сапфировое контактное охлаждение или охлаждение холодным воздухом



ZYE YAG®: Самый универсальный и безопасный ЛАЗЕР на рынке.

САМЫЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПОКАЗАНИЙ



РЕЖИМ LongPulse®:

в миллисекундном диапазоне для терапии доброкачественных сосудистых поражений кожи и эпиляции.



РЕЖИМ DYNAMICS® :

микросекундный диапазон для неабляционной шлифовки кожи, лечения розацеа и для омоложения, а также для лечения онихомикоза.



РЕЖИМ INTENSE-YAG® :

непрерывный режим, предлагает новый подход к омоложению кожи и лазерной подтяжке кожи шеи и лица.



ДО

ПОСЛЕ

Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



ДО

ПОСЛЕ

Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



ДО

ПОСЛЕ

Фото предоставлено Адрианой Каиро, доктором - Бразилия



ДО

ПОСЛЕ

Фото предоставлено Адрианой Каиро, доктором - Бразилия



ДО

ПОСЛЕ

Фото предоставлено Родриго Кикучи, доктором.



ДО

ПОСЛЕ

Фото предоставлено Родриго Кикучи, медицины.



СОВЕРШЕННАЯ ЛАЗЕРНАЯ SMART-ПЛАТФОРМА



Максимальная многофункциональность и интеллектуальные решения

- 8 уникальных технологий, соответствующих золотому стандарту;
- Более 70 показаний к лечению по FDA;
- Для всех типов кожи;
- Всесезонные решения;
- Быстрое и удобное подключение насадок.



ПОБЕДИТЕЛЬ
ПРЕМИЙ "ПРОРЫВ
ГОДА В ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ" И
"ПРОРЫВ ГОДА В
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ"



ПЛАТФОРМ, ПРОДАННЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ НА НАЧАЛО 2022 ГОДА



2-летняя
гарантия
производителя



Мощное
устройство 2-го
поколения



Надежная, давно
существующая
платформа
2-го поколения



Полнодиапазонное
напряжение,
простая установка



Компактная
и портативная
конструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ETHEREA-MX®	
ТЕХНОЛОГИЯ	ЛАЗЕРНАЯ И СВЕТОВАЯ ПЛАТФОРМЕННАЯ СИСТЕМА
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ПОЛНОДИАПАЗОННЫЙ 110-220 В
РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)	48 x 88 x 43 см
ВЕС	52,5 кг
ДОСТУПНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ	8





handpico

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
В МИРЕ ФРАКЦИОННЫЙ
ПИКОСЕКУНДНЫЙ
ЛАЗЕР

Nd:YAG 1,064/532 - нм
фракционный пикосекундный
наконечник



Один лазер для всех видов татуировок:

нано - и пикосекундные режимы
в 2 доступных диапазонах длин волн



Высокая рентабельность инвестиций:

дополнение к самым универсальным
ЛАЗЕРНЫМ платформам.



**Безопасен и эффективен для
всех типов кожи** с субдермальным
акустическим, фотоионизирующим
эффектом.



**Новый, уникальный тренд для вашей
практики:** фракционная неабляционная
пикосекундная шлифовка кожи.



**Портативный бесконтактный
наконечник, не требующий
разогрева:** более быстрые
процедуры с улучшенным удобством
использования и меньшими требованиями
к обслуживанию.



Эксклюзивно для самых
универсальных в мире
ЛАЗЕРНЫХ платформ:



etherea^{MX} Z Y E

Виды терапии




Морщины



Удаление
татуировок




Мелазма

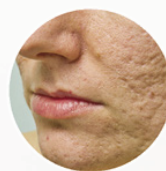

Рубцы постакне



Пигментные пятна

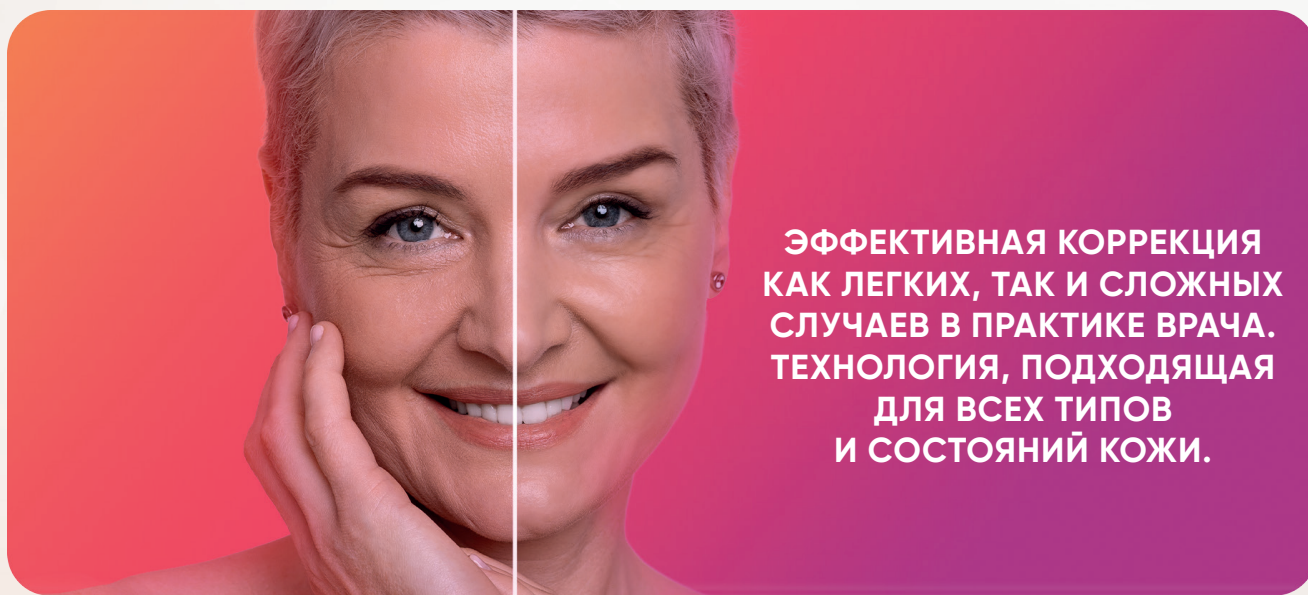

**ЭФФЕКТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ
КАК ЛЕГКИХ, ТАК И СЛОЖНЫХ
СЛУЧАЕВ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА.
ТЕХНОЛОГИЯ, ПОДХОДЯЩАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
И СОСТОЯНИЙ КОЖИ.**

МИКРОФРАКЦИОННЫЙ PICOTONING®



Изображения предоставлены доктором Эмерсоном Алвесом – дерматологом из Бразилии

Мягкое омоложение кожи без реабилитации благодаря уникальному микрофракционному PICOtoning®, обеспечивающему тонизацию, омоложение кожи, а также удаление пигментных пятен

МИКРОФРАКЦИОННЫЙ INTENSEPICO® МНОГОСЛОЙНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical

Омоложение IntensePICO® приводит к глубокому ремоделированию дермы, выравниванию тона кожи и эффективному омоложению.

ПЯТНА



1,064 нм	532 нм
3, 5 и 7 мм	3 и 5 мм
6x6 (MLA)	н/п



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ДЛИНА ВОЛНЫ	1,064 нм и 532 нм
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ	500 мДж
РЕЖИМ РАБОТЫ	пс и нс
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА	530 пс и 2,5 нс
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ	10 Гц

handPICO® создает необходимые LIOB (индуцированная лазерным излучением оптическая лазерная искра) Обеспечивает фотоионизирующий эффект пикосекундного лазерного воздействия

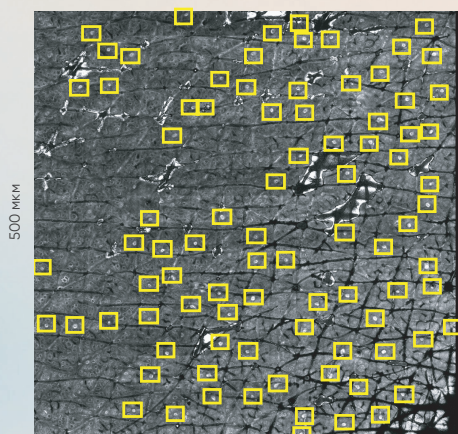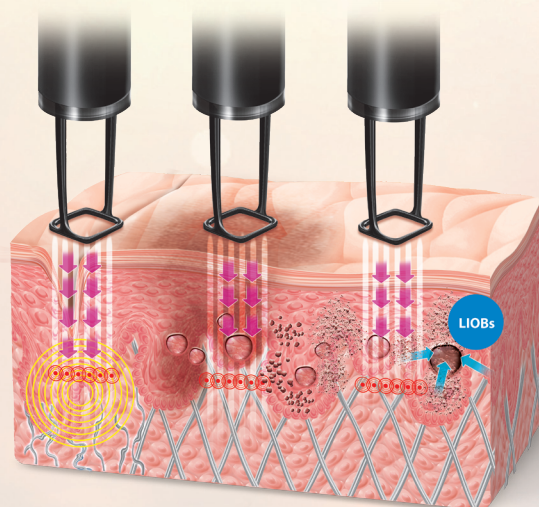


На изображении показано количество LIOB при конфокальной микроскопии, проведенной Франсиско Пашоалом, дерматологом и профессором Медицинской школы ABC, Бразилия.

*Йех У. Т., Пенн Дж. Х., Пенг П.. Гистология кожи ex vivo после терапии фракционным пикосекундным Nd:YAG-лазером в высоко- и низкоэнергетических режимах. J Cosmet LASER Ther. 2020;22(1): 43-47. doi: 10.1080/14764172.2019.1710536. Epub 3 января 2020 г. PMID: 31900067.

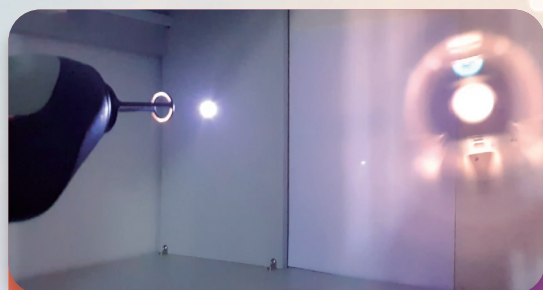

ЭФФЕКТ ФОТОИОНИЗАЦИИ

клеточная ионизация вызывает образование LIOB (индуцированный лазерным излучением оптический лазерной искрой) или кавитационных вакуолей, стимулируя неоколлагенез без термического взаимодействия.

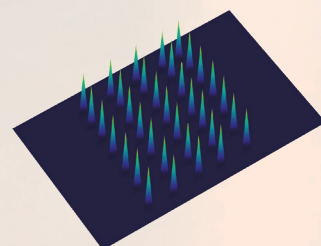

Представление микропучков MLA высокой и низкой интенсивности.

ФРАКЦИОННОЕ ПЯТНО MLA

последовательностью импульсов способствует формированию LIOB, сочетая ультракороткое время импульса в 530 пс с высокой энергией и высокой пиковой мощностью.

ПЕРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА В ПИКО (530 ПС) ИЛИ НАНОСЕКУНДАХ (2,5 НС)

для достижения наилучших результатов при удалении татуировок и пигментов.



Изображения предоставлены доктором Александром Филиппо, дерматологом – Бразилия

“



“handPICO® привнесла на рынок эстетической медицины нечто действительно уникальное. Я уверен, что подобная технология, обеспечивает достаточную эффективность и мощность при действительно короткой длительности импульса, чтобы добиться наилучших результатов. Я думаю, что handPICO® не уступит ни одной другой специализированной, автономной пикосекундной системе”.

Нуно Осорио, доктор
Сан-Паулу, Бразилия



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



ipl-sq

Универсальная **многофункциональная система фототерапии**, разработанная для всех типов кожи и для решения большинства эстетических и дерматологических проблем.



Многофункциональная система:

один наконечник с многообразием фильтров- 400, 515, 540, 580, 640 и 695 нм – плюс уникальные наконечники VascuTips® размером 8 и 12x12 мм для максимально точного прицельного воздействия



Непревзойденный комфорт для пациентов:

сапфировое стекло с контактным охлаждением до 2 °C, безболезненно и безопасно



Запатентованная технология Square-Wave Pulse® обеспечивает постоянную, равномерную подачу энергии в течение всего импульса;



IPL-Sq® DYNAMICS® для динамической эффективной работы для достижения более впечатляющих результатов



Фильтр 695 нм для терапии темной кожи



Более широкий диапазон длительности импульса для эффективной и безопасной работы

Виды терапии



Удаление
волос



Пигментные
поражения



Сосудистые
поражения



Омоложение
кожи



Лечение акне



Фото предоставлено Селией Калил, доктором – Бразилия



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical

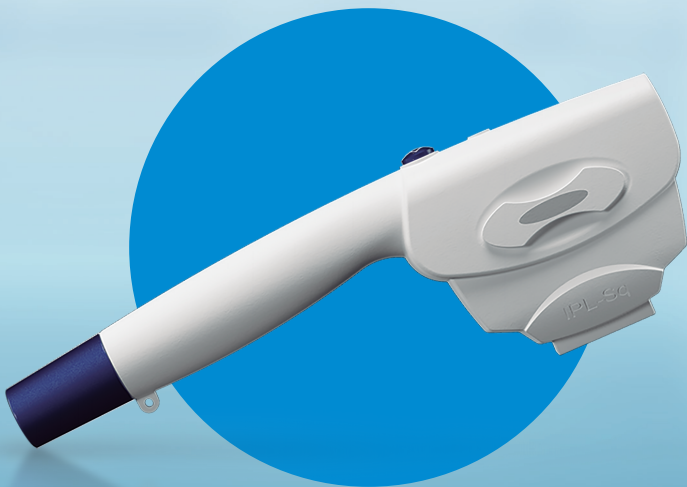


Фото предоставлено Селией Калил, доктором – Бразилия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	IPL-Sq®
ДЛИНА ВОЛНЫ	400, 515, 540, 580, 640, 695, Dual-Band*
РАЗМЕР ПЯТНА	40 x 12 мм
VASCUTIP™	8 мм, 12 x 12 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ	30 Дж/см²
ШИРИНА ИМПУЛЬСА	от 5 до 100 мс
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Встроенное сапфировое контактное охлаждение
МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ	3 Гц

*Доступно только на платформе ZYE®





Эксклюзивный и уникальный
фракционный ProDeep® Nd:YAP
1340 нм

Глубина и эффект коагуляции,
большая эффективность для
объемного прогрева тканей.



**Самое эффективное фракционное неабляционное
омоложение кожи с максимальными результатами:**

ProDeep® обеспечивает самое глубокое омоложение кожи.
Глубина прогрева и стимуляция тканей позволяет добиться
выдающихся результатов при лечении рубцов, морщин,
растяжек и акне.



**Единственная в своем роде лазерная технология,
не имеющая аналогов:** ProDeep® была впервые
представлена в начале 2009 года и с течением времени
завоевывала все больший авторитет, благодаря своей
эффективности, безопасности и минимальному времени
реабилитации при всех предлагаемых показаниях к лечению.



**Высокие технологии для достижения еще более
высоких результатов:** ProDeep® имеет широкий спектр
усовершенствований, касающихся как параметров и настроек
системы – таких, как длительность импульса, энергия и размер
рабочего пятна, – так и ее оптических возможностей для более
эффективных результатов.

Виды терапии



Морщины




Рубцы



Растяжки



Мелазма

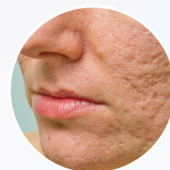Рубцы
постакне

Предоставлено Марко Тулио, доктором - Бразилия



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



Предоставлено Камилой Хофбауэр, доктором - Бразилия



Предоставлено Валерией Кампос, доктором - Бразилия



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ProDeep®
ДЛИНА ВОЛНЫ	Лазер Nd:YAP 1 340 нм
ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЯТЕН	6 мм
	8 мм, 100 МТЗ/см ² 10 мм, 400 МТЗ/см ²
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ	200 мДж/МТЗ
ШИРИНА ИМПУЛЬСА	3 - 20 мс
ВСТРОЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ	Доступен адаптер для системы воздушного охлаждения
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ	до 2,5 Гц



ACROMA^{QS}

Сверхмощный лазер
с длиной волны 1,064/532 нм



Максимальная рентабельность инвестиций:

ACROMA-QS® предлагает безопасную процедуру без реабилитации для всех типов кожи и всесезонно – без ограничений!



Самый мощный наконечник Q-switched:

запатентованная разработка системы с двумя наконечниками обеспечивает эффективное удаление татуировок, требуя меньше сеансов по сравнению с другими наносекундными наконечниками с технологиями Q-switched.



Эффективные результаты при удалении татуировок:

благодаря 2 длинам волн (1 064/532 нм) и нескольким размерам пятна ACROMA-QS® может легко удалять татуировки любого цвета, от более темных до светлых.

Виды терапии



Выравнивание тона лица



Удаление татуировок




Пигментные поражения и Laser Toning



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



Предоставлено Валерией Кампос, доктором-Бразилия

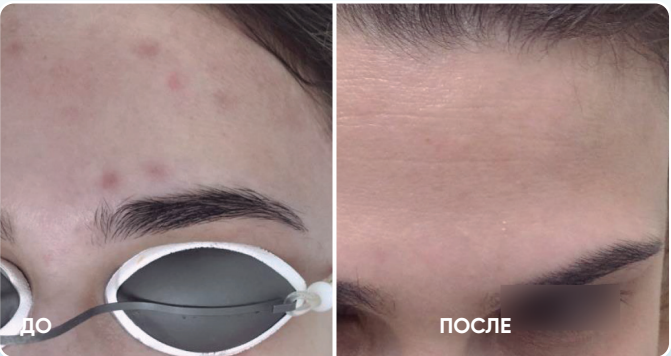

Предоставлено Гильерме Буэно, доктором-Бразилия



Предоставлено Карлосом Эдуардо де Фрейтасом, доктором-Бразилия



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ACROMA-QS®
длина волны	Лазер Nd:YAG 1064 нм КТР 532 нм
ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЯТЕН	1064 нм 3, 5, и 7 мм 1064 нм 9 мм, 100 МТЗ/см2 * 532 нм, с 3 и 5* мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ	1,500 мДж
ШИРИНА ИМПУЛЬСА	20 нс
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ	до 5 Гц

* Опциональный размер пятна



longpulse

Длинно-/короткоимпульсный, высокомощный лазер Nd:1064 нм для терапии доброкачественных сосудистых поражений лица и тела, а также для лазерного омоложения кожи



Максимально эффективное лечение для решения проблем с сосудистыми поражениями области нижних конечностей:

идеальная глубина проникновения, благодаря длине волны (1064 нм, LongPulse® достигает длительности импульса до 60 мс и максимальной энергии до 500 Дж/см², обеспечивая эффективность самых востребованных процедур.



Повышение рентабельности инвестиций благодаря

расширению возможностей лечения: уникальный LongPulse® DYNAMICS® обеспечивает короткие импульсы, что дает возможности для омоложения кожи и терапии онихомикоза.



Эффективное и безопасное лечение сосудистых поражений

лица: благодаря использованию нескольких размеров пятна – 2, 3 и 6 мм – в сочетании с не имеющим совсем аналогов LongPulse® DYNAMICS®, наконечник позволяет лечить сосудистые поражения лица, шеи, декольте и тела, такие как небольшие телеангиэктазии, розацеа и ретикулярная пойкилодермия (пойкилодермия Сиватта) .



Повышенный комфорт и безопасность во время процедур

благодаря системе с воздушным охлаждением, которая обеспечивает бесконтактную защиту кожи пациента в течение всего сеанса лечения.

Виды терапии



Вены на ногах



Телеангиэктазии
на лице



Удаление волос




Онихомикоз





Тонизирование
кожи




Предоставлено Чарльзом Эстевесом, доктором-Бразилия

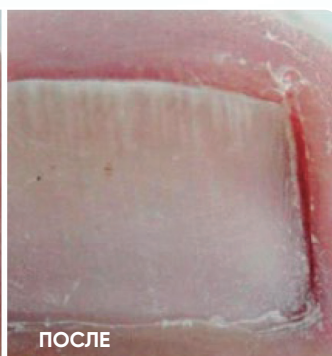

Предоставлено Марсией Сансоне, доктором-Бразилия

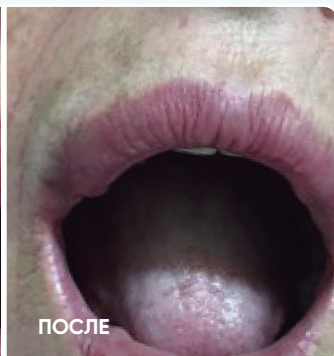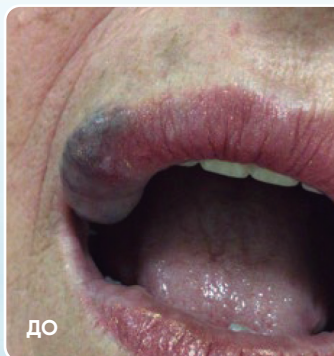

Предоставлено Флавией Регинатто, доктором-Бразилия

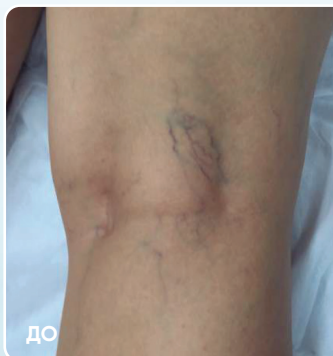

Предоставлено Родриго Кикучи, доктором-Бразилия



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LongPulse®
ДЛИНА ВОЛНЫ	Лазер Nd:YAG 1064 нм
ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЯТЕН	2, 3, 6 и 9 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ	500 Дж/см²
ШИРИНА ИМПУЛЬСА	от 0,3 до 60 мс
ВСТРОЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ	Доступен адаптер для системы воздушного охлаждения
РЕЖИМ РАБОТЫ	LongPulse®, DYNAMICS®
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ	до 10 Гц



DUALMODE

Мощный ER: YAG 2940 нм, с возможностями лифтинга со стороны ротовой полости и интимного омоложения.

Лазерное омоложение кожи. Абляционные методики: пилинги и шлифовки полным и фракционным лучом Er:YAG 2940 нм



Результат, схожий с фракционным лазером CO₂, но с гораздо меньшим временем реабилитации и гораздо более высокой безопасностью: DualMode® оснащен эксклюзивной системой двойного импульса, которая сочетает абляционный и неабляционный эффект, обеспечивая вдвое большую эффективность для фракционной шлифовки кожи. По сравнению с CO₂ - лазером, DualMode®, обеспечивает совершенно новый подход к лечению с минимальным или нулевым риском осложнений и побочных явлений.



Самые эффективные процедуры благодаря, нескольким размерам пятна и множеству параметров для различных показаний, таких как лазерное омоложение кожи. Абляционные методики и пилинги, шлифовки полным и фракционным лучом ER: YAG 2940 нм. С помощью одного наконечника – фракционные линзы с площадью 100 и 400 МТЗ/см² для нескольких размеров пятна, длительность импульса от 0,3 до 400 мс и частота повторения до 5 Гц.



Новые методы лечения, которые превосходят тренды и продвигают ваш бизнес на рынке: DualMode® также предлагает безболезненные и не требующие времени реабилитации процедуры: интраоральный лазерный лифтинг (InLift®), лазерный пилинг с эффектом "гладкого прикосновения" для самого суперфункционального слоя кожи (TrueLift®) и лазер ATHENA® для улучшения интимного здоровья женщин в качестве безболезненных и не требующих времени реабилитации процедур.

Виды терапии



Возрастные
изменения



Вагинальное
лечение



Лазерный
лифтинг



Пигментация



ДО



ПОСЛЕ

Предоставлено компанией VYDENCE® Medical




ДО



ПОСЛЕ

Предоставлено Люсьеной Сегатто Мартинс Ортигоса,
доктором-Бразилия

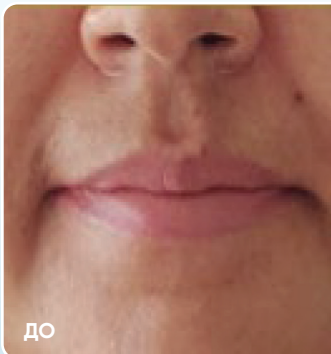

ДО



ПОСЛЕ

Предоставлено Клессией Роча,
доктором-Бразилия



ДО



ПОСЛЕ

Предоставлено Люсьеной Сегатто Мартинс Ортигоса,
доктором-Бразилия



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DualMode®
ДЛИНА ВОЛНЫ	Лазер Er:YAG 2 940 нм
ДОСТУПНЫЙ РАЗМЕР ПЯТЕН	Ø 8 мм, 100 MT3/см2 фракционная линзовая решетка Ø 8 мм, 400 MT3/см2 фракционная линзовая решетка InLift® Коллимированные линзы 2,5* и 6 мм 12 мм** TrueLift® **
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ	Ø 8 мм, 400 MT3/см2 фракционная линзовая решетка InLift®
ШИРИНА ИМПУЛЬСА	Коллимированные линзы 2,5* и 6 мм
ВСТРОЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ	12 мм** TrueLift® **
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ	до 5 Гц
ДОСТУПНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ATHENA®90+*, ATHENA®360* Массив фракционных линз и коллимированные линзы

* Опциональный размер пятна

**Доступно только на платформе ZYE®



goSmooth

Максимальная
эффективность и золотой
стандарт фракционного
неабляционного лазера
Er:Glass с длиной волны
1540 нм для прицельного
воздействия на проблему



Золотой стандарт мирового уровня фракционного неабляционного лазерного омоложения всех типов кожи.

GoSmooth® - фракционный, неабляционный лазерный пилинг для профилактики и коррекции самых первых признаков старения.



Безопасный подход к омоложению лица, шеи и всего тела: одна из лучших технологий коррекции растяжек, GoSmooth® разработана таким образом, чтобы обеспечить терапевтическую эффективность и безопасность процедур для любой области тела.




Естественные и заметные результаты гарантированы уже с первой процедуры, которую можно сделать в обеденный перерыв, не требуют отрыва от повседневной деятельности.

Виды терапии



Морщины

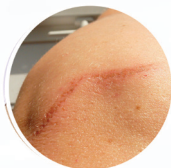

Шрамы и рубцы
от акне



Растяжки



Мелазма



Предоставлено Эмерсоном Алвесом, доктором-Бразилия



Предоставлено Эмерсоном Алвесом, доктором-Бразилия



Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GoSmooth®
ДЛИНА ВОЛНЫ	Лазер Er:GLASS с длиной волны 1540 нм
ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЯТЕН	8 мм, 100 МТЗ/см ² фракционная линзовая решетка
	10 мм, 400 МТЗ/см ² фракционная линзовая решетка
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ	95 мДж/МТЗ
ШИРИНА ИМПУЛЬСА	10-15 мс
ВСТРОЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ	доступен адаптер системы воздушного охлаждения
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ	до 1 Гц



INTENSE IR

Интенсивное и эффективное IR решение для лифтинга кожи с показаниями для коррекции проблем как лица, так и тела.



Максимально эффективные и быстрые процедуры лифтинга с мгновенным эффектом. Благодаря высокоэнергетическому источнику инфракрасного излучения.

Процедуры для лица и тела, с использованием стандартного режима и режима DYNAMICS®.




Повышение рентабельности инвестиций благодаря нескольким подходам к процедурам для лица и тела.



Более безопасные процедуры благодаря системе пред- и пост-охлаждения, защищают эпидермис при глубоком воздействии на дерму.


Как это работает?

Система предварительного охлаждения intenseIR® защищает эпидермис перед подачей энергии глубоко в дерму, чтобы нагреть целевую ткань и способствует её лифтингу без травматизации.

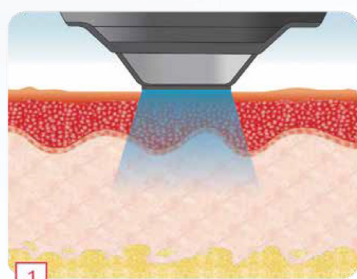


1

Предварительное охлаждение защищает эпидермис, предотвращая последующие травмы во время применения

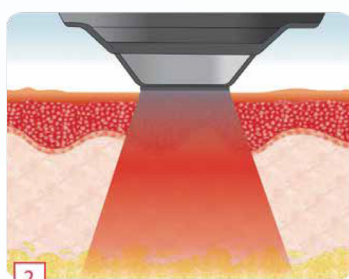

2

глубокий прогрев ткани, наличие воды в целевом хромофоре

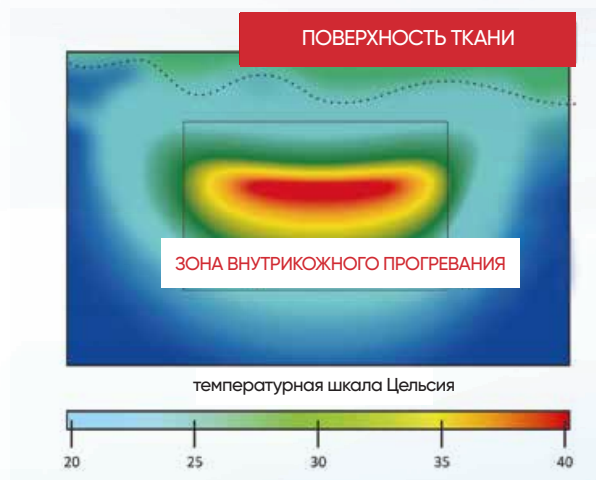


Виды терапии



Лифтинг тела



Лифтинг кожи

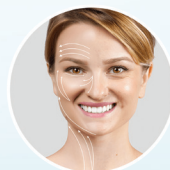

Омоложение кожи



ДО

ПОСЛЕ

Предоставлено Илен Кастанья, доктором-Бразилия



ДО

ПОСЛЕ

Предоставлено компанией VYDENCE® Medical



ДО

ПОСЛЕ

Предоставлено компанией VYDENCE® Medical

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	intenseIR®
ДЛИНА ВОЛНЫ	850 - 1800 нм
МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛАВНОСТЬ	130 Дж/см²
ШИРИНА ИМПУЛЬСА	3-10 с
РАЗМЕР ПЯТНА	30 x 12 мм



Эксклюзивный дистрибьютор
МЕДИКАЛ СПА ТЕХНОЛОДЖИ
www.medispatechnology.ru